




ディープフリーザの温度監視に 警報通報機能付き無線ロガーのご案内

ディープフリーザの管理は
記録後の温度チェックだけで安心ですか？


チノのMD8000シリーズは、**自動で異常を検知！**
検知後は、**警報出力**や**メール通報**を行います。

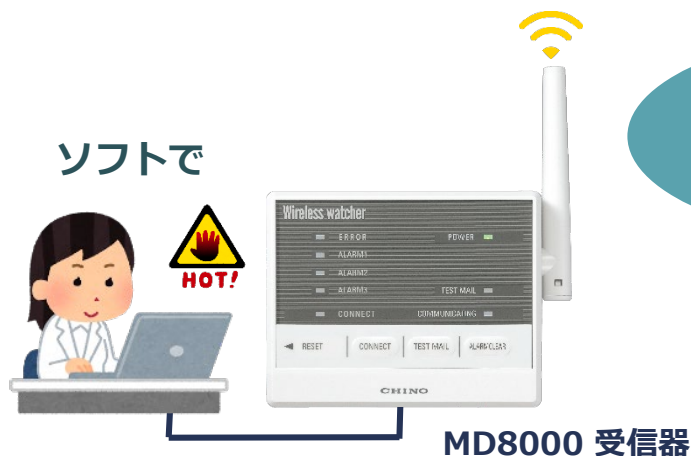

温度異常を
自動検知



検知後は
すぐにお知らせ

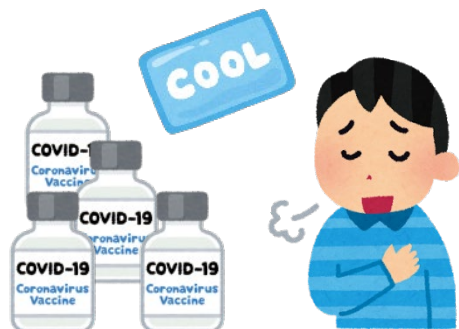

豊富なラインナップで 様々な監視を同時に


詳細はカタログをご用意しています。



<イーサネット版>
受信器**単独**での
メール通報が可能



<USB版>
社内LANが使用できない
場合などに

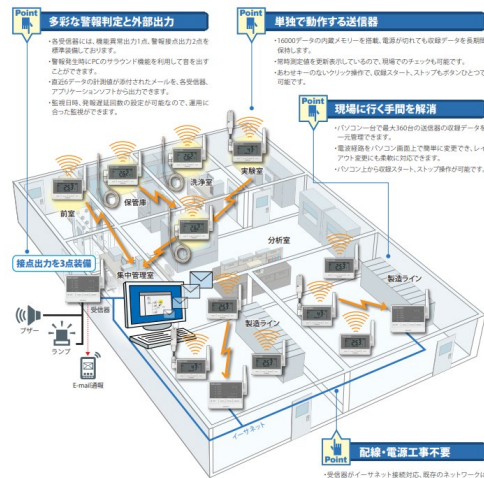


室温・湿度監視



<温湿度モデル>
ディープフリーザを**設置した部屋**の管理に

ディープフリーザ増設など 追加・拡張も簡単

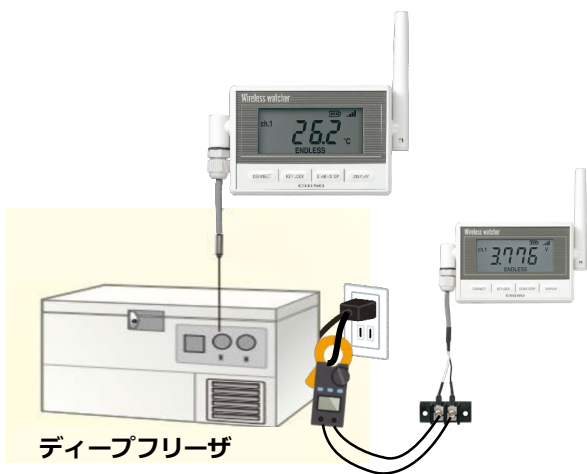


<測温抵抗体モデル>
ディープフリーザの**温度監視**に

<電圧モデル>
ディープフリーザの**電源監視**に

低温に適した高精度のセンサもご用意

クライオバイアル用 測温抵抗体 R907シリーズ

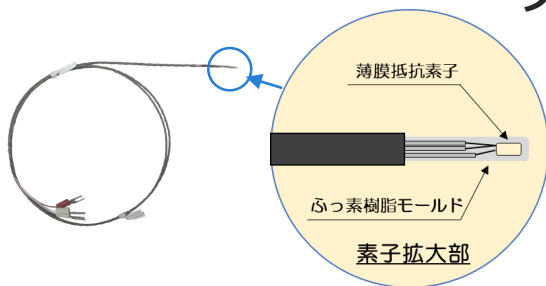

-196℃でクラスA (±0.54℃) の対応可能

外部からの熱流入を受けにくい構造で、
速い応答性の円筒形、平面に取り付けやすい台形、
強度が高い保護管付きの3種を用意

素子：Pt100Ω 3線式 (クラスA推奨)
素子範囲：-200℃~180℃

CHINO
株式会社 **チノ**

コールセンター お客様相談室

☎ 0120 - 41 - 2070

お問い合わせフォーム <https://www.chino.co.jp/form/form/form.cgi>

※この資料の掲載内容は 2021 年3 月 現在のものです。